

INSTRUKTIONER FÖR ANVÄNDNING

Förstoringsglas S4 + stativ



En förstoringsskåp på ett fyrarmat stativ gör det möjligt att se huden och hudförändringar på nära håll och lyser även upp behandlingsområdet. Används även för manikyr- och pedikyrbehandlingar samt permanent makeup. LED-lamporna lyser starkt och ökar arbetskomforten.

Tekniska data:

Spänning	220-240V
Kraft	22W
Frekvens	50/60 Hz
Utvidgning	5 dioptrier

Enhetens mått:




Försiktighetsåtgärder:

1. Använd inte enheten i närheten av badkar, tvättställ eller andra vattenbehållare.
2. Rör inte vid metalldelarna när du ansluter kontakten.
3. Enheten bör rengöras med jämna mellanrum för att förhindra att smuts ansamlas. Det är bäst att rengöra enheten med en fuktig trasa.
4. Vira inte nätkabeln runt enheten.
5. Se till att apparaten är ansluten till rätt strömkälla och att stickkontakten är korrekt isatt i vägguttaget.
6. Anslut inte enheten med våta eller fuktiga händer.
7. Använd inte apparaten om stickkontakten är varm eller skadad.
8. Förvara inte enheten i badrummet eller i andra utrymmen med hög luftfuktighet.
9. Använd inte enheten i närheten av brandfarliga ämnen.
10. Slå eller kasta inte enheten.


Specifikationer för enheten:

1. Strömkontakt
2. Enhetens arm
3. Lampa
4. På/av-omkopplare
5. Justering av lampa
6. Stativ
7. Bas
8. Cirkel

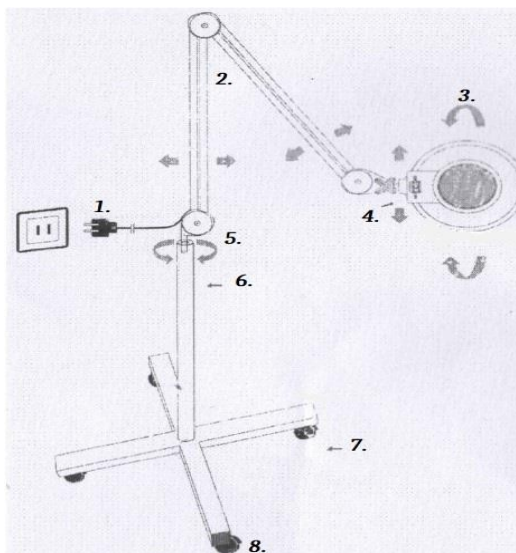

Montering:

1. Montera först ihop basen och stativet. Koppla ihop de två benen och stativet med hjälp av en bricka och skruv, se bild 1. Koppla sedan ihop lampan med stativet (bild 2).

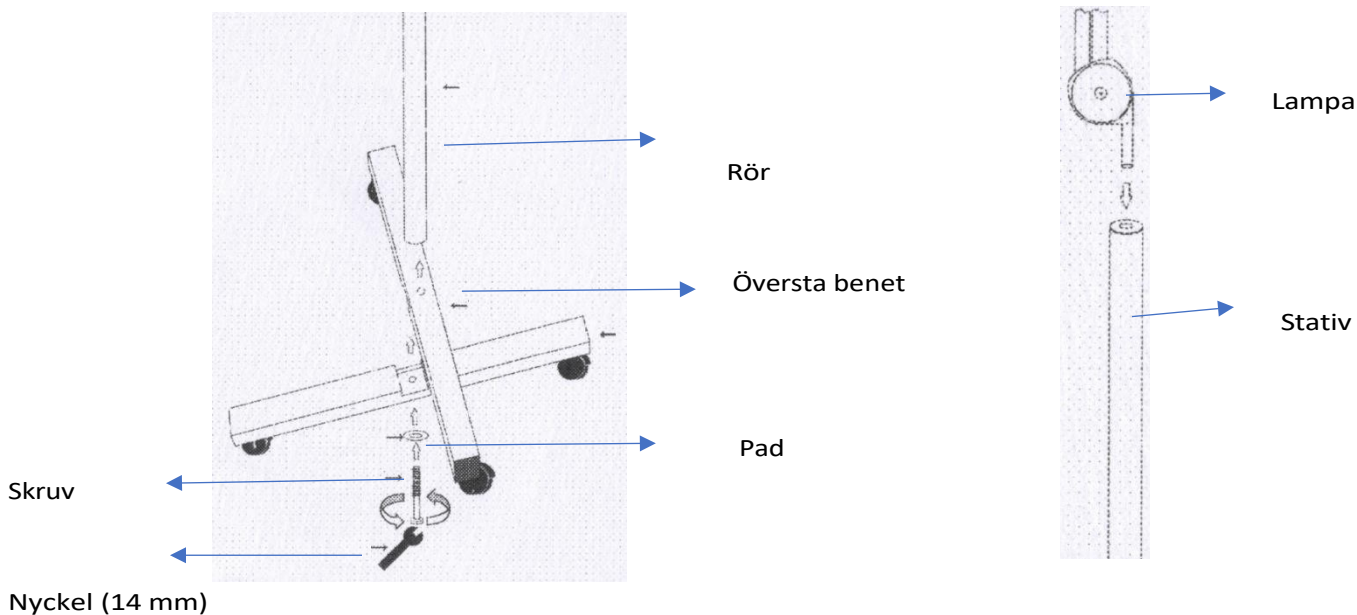

Instruktioner för användning:

1. Montera enheten.
2. Anslut dem till en lämplig strömkälla.
3. Starta lampan.
4. Justera lampans positionering efter behov.
5. Kom ihåg att dra ur kontakten när du är klar.

SÄKERHETSÅTGÄRDER

1. Apparaten är en professionell utrustning för användning vid kosmetiska operationer. Om apparaten endast används av kvalificerad kosmetisk personal kan oönskade effekter under behandlingen undvikas.
2. Apparaten får inte demonteras eller användas för andra ändamål än de som anges i denna bruksanvisning. All service och alla reparationer får endast utföras av en auktoriserad servicetekniker (företaget ACTIVESHOP Sp. z o.o.).
3. Installera eller använd inte enheten i närheten av vätskor, våta områden eller med våta händer - se till att inga vätskor kommer in i enheten.
4. Dra omedelbart ut stickkontakten ur vägguttaget och kontakta den auktoriserade service som ACTIVESHOP Ltd. tillhandahåller i följande fall:
 - a) vätska har trängt in i apparaten, b) apparaten avger en konstig lukt, rök eller konstiga ljud,
 - c) strömförsörjningskabeln har skadats, d) apparaten har välts eller höljet har skadats.
5. Placera inte några föremål på kablarna. Installera inte enheten på en plats där någon kan trampa på strömkabeln.
6. Av säkerhetsskäl ska du dra ut nätkabeln ur vägguttaget varje gång du avslutar arbetet med enheten.
7. För inte in något i apparatens öppning. Om ett främmande föremål kommer in i öppningen ska du dra ut kabeln ur uttaget och kontakta återförsäljaren eller tillverkaren.
8. Placera inte enheten på en instabil vagn, hylla eller fordon. Enheten kan skadas om den faller.
9. För att garantera enhetens fasta livslängd rekommenderas att man håller ett intervall på en minut innan man trycker på strömbrytaren igen (mellan på- och avstängning och vice versa).
10. Strömförsörjningen måste överensstämma med specifikationerna på märkskylten. Annars finns det risk för att apparaten inte fungerar som den ska, skadas eller till och med bränns upp.

NOTER:

1. Vid skador på nätkabeln eller andra funktionsfel ska du kontakta en auktoriserad serviceverkstad - på så sätt undviker du fara.
2. Denna utrustning får användas av barn som är minst 8 år gamla och av personer med nedsatt fysisk och mental förmåga och brist på erfarenhet och kunskap om utrustningen om övervakning eller instruktioner ges om hur utrustningen ska användas på ett säkert sätt så att de associerade riskerna förstås.
3. Apparaten är inte avsedd att lekas med av barn. Låt inte barn leka med apparaten.
4. Lämna inte apparaten obevakad när barn eller personer utan tillräcklig kunskap om hur apparaten ska användas befinner sig i närheten.
5. Denna elektriska apparat är inte en leksak. Felaktig användning eller kontakt med den elektriska apparaten kan utgöra en hälsorisk eller leda till dödsfall, och därför ska apparaten användas och förvaras utom räckhåll för barn.

KASSERING AV APPARATEN



Lämna in förbrukade elektriska apparater, armaturer och förpackningar till återvinningscentraler i enlighet med miljöskyddsbestämmelserna. Elektriska apparater får inte slängas i hushållssoporna. Följ de regler som gäller för avfallshantering av denna typ av utrustning. För att skydda miljön i enlighet med direktiv 2012/19/EG om avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter, ska använda apparater

El ska samlas in separat och sedan överlämnas till följande punkter

Insamling av avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter. Gamla apparater som är uttjänta innehåller komponenter som kan återvinnas helt och hållet och bör därför lämnas in för upparbetning. Därför ska de lämnas till lämpliga insamlingsställen samt till företaget ACTIVESHOP Sp. z o.o.

LAGRING OCH TRANSPORT

Enheten får endast transporteras i sin originalförpackning vid en temperatur mellan (-) 20 °C och (+) 50 °C. Förvara enheten i ett väl ventilerat utrymme med en relativ luftfuktighet på högst 75%. Driftstemperatur mellan (+) 10 °C och (+) 40 °C. Under förvaring och transport får enheten inte kastas eller tappas, utsättas för mekaniska stötar eller atmosfäriska ämnen.